



Unități de aspirație

de calitate elvețiană



Cuprins

Cuprins/Certificări	2
Matricea de produse	3
Vacuson 18	4
Vacuson 40	5
Vacuson 60	6
Exemple de configurații pentru Vacuson 40 și Vacuson 60	7
Sisteme de colectare	8
Extensii și accesorii	9
Canule și chiurete	10
Mai multe pompe de aspirație și de infiltrație	11
Adresele Nouvag și partenerii de afaceri	12

Certificate



Matricea de produse

Verificați tabelul de mai jos pentru a determina care dispozitiv Nouvag se potrivește cel mai bine pentru domeniul dumneavoastră de activitate. Toate pompele sunt fabricate în Elveția și sunt renumite pentru fiabilitatea și construcția lor solidă. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări din țara dumneavoastră.

	Vacuson 18	Vacuson 40	Vacuson 60	Vacuson 60 LP
•• Optim • Adecvat	18 l/min. -0,8 bar la 610 mmHg	40 l/min. -0,9 bar la 686 mmHg	60 l/min. -0,9 bar la 686 mmHg	60 l/min. -0,9 bar la 686 mmHg
Domeniul medical				
Operații generale	••	••	••	
Endoscopie		••	•	
Tratament cu vacuum (vid)		••	••	
Obstetrică		••		
Aspirația căilor respiratorii	•			
ORL		••	•	
Neurochirurgie		•	••	
Chirurgie generală		•	••	
Liposucție			•	••
Sala de operație				
Sala de operație	••	••	••	••
Departamentul de urgențe	•			
Cabinet stomatologic	•	••		
Cabinet medical	•	••	••	••
Îngrijire specială la domiciliu	•	••		
Îngrijire la domiciliu	••			


Pompele descrise în această broșură sunt în mod corespunzător echipate cu accesoriile specifice utilizate, de exemplu, în următoarele domenii:

- Pompă portabilă (Vacuson 18)
- Pompă universală pentru spitale și cabinete (Vacuson 40)
- Pompă de chiuretaj pentru diagnosticare și chiuretaj terapeutic sau post-chiuretaj (Vacuson 40)
- Pompă de extracție pentru obstetrică în ginecologie (Vacuson 40)
- Pompă pentru chirurgie (Vacuson 60)
- Pompă pentru liposucție (Vacuson 60)
- Pompă pentru liposucție cu pompă de infiltrație integrată și canulă de mână corespunzătoare (Vacuson 60 LP)

Vacuson 18, compact și portabil

Dispozitiv de vid pentru o gamă largă de domenii, de multe ori folosite la cabinete medicale, cabinete stomatologice și în îngrijirea la domiciliu. Versatilitatea sa îl fac prima alegere în fiecare mediu. Accesibil, durabil și simplu de utilizat.

Unica pompă de vid fără ulei este rezultatul a peste 20 de ani de dezvoltare. Un număr mare de ani de experiență în domeniul medical a dus la produsul nostru Vacuson 18. Acesta produce o extragere constantă a aerului, fără vibrații puternice și foarte silențios. O supapă de vid cu diafragmă asigură crearea ușoară și rapidă de vid. Această caracteristică garantează o viață lungă datorită utilizării fără întreținere.

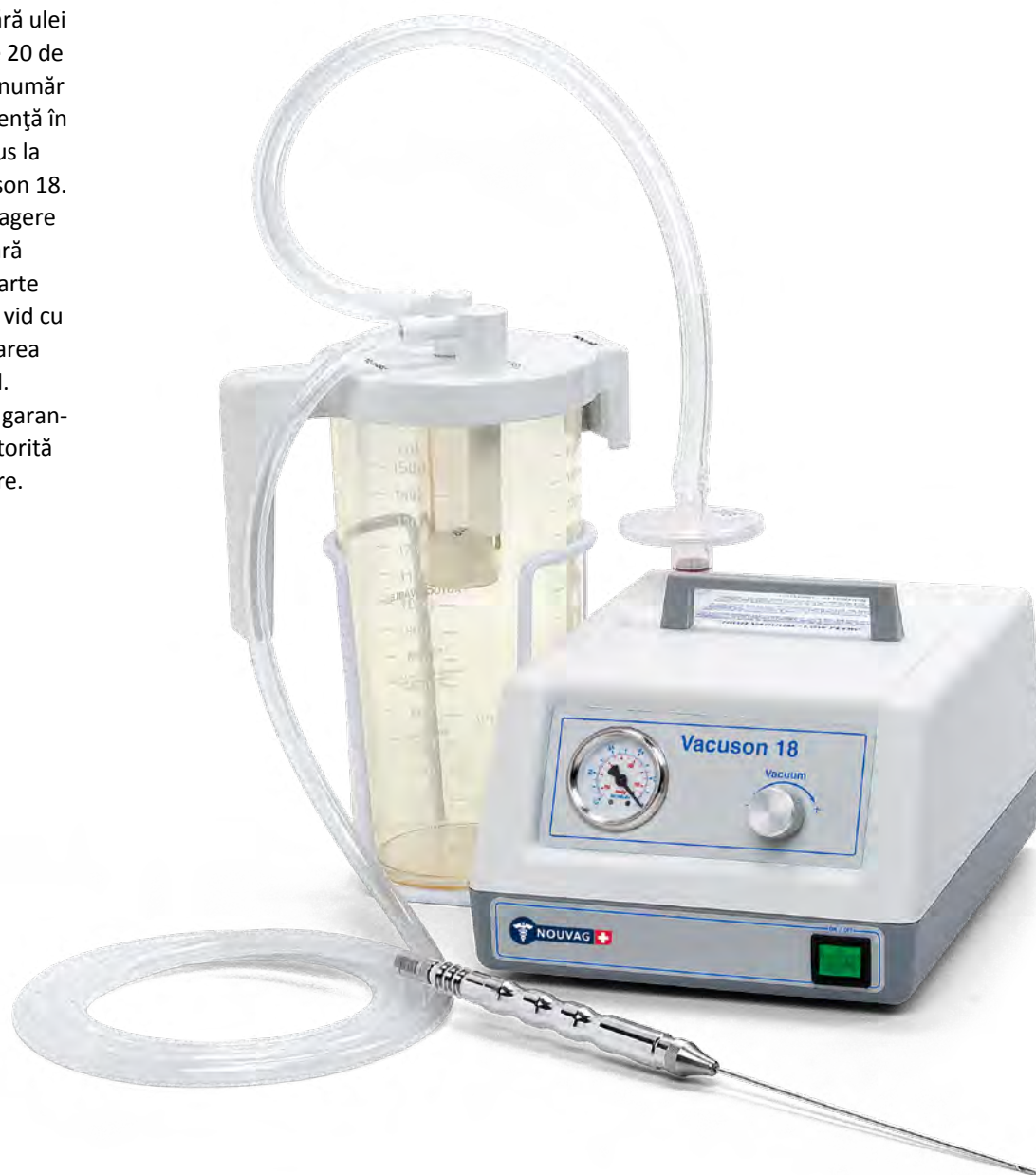

Tip:	Vacuson 18
Tensiune la intrare:	115/230 Volți la 50-60 Hz
Consum de putere	175 W
Capacitate de aspirație:	Până la 18 l/min.
Vid maxim:	-0,8 bar /610 mmHG
Dimensiuni, unit. de comandă (L x l x î):	190 x 130 x 250
Greutate, unitate de comandă:	3,2 kg

Vacuson 40, un vid puternic și un domeniu extins de utilizare

Pompele Vacuson sunt folosite pentru aspirația fluidelor și a secrețiilor. Puterea pompei poate fi reglată continuu, monitorizată de manometrul cu scară în bar și mmHG.

Pompa de aspirație Vacuson 40 este renumită pentru construcția solidă, manevrarea facilă și nevoile scăzute la întreținere. Acoperă o gamă largă de domenii de utilizare, cum ar fi Obstetrică, Endoscopie, ORL și multe altele. De fapt,

Vacuson 40 este cea mai versatilă dintre pompele noastre. Așa cum numele o sugerează, pompa oferă o capacitate de până la 40 de litri pe oră și își face treaba silențios, cu un nivel scăzut de vibrații.



Tip:	Vacuson 40
Tensiune la intrare:	115/230 Volți la 50-60 Hz
Consum de putere	185 W
Capacitate de aspirație:	până la 40 l/min.
Vid maxim:	-0,9 bar at 686 mmHG
Dimensiuni, unitatea de comandă (L x l x i):	360 x 290 x 280
Greutate, unitatea de comandă:	8,5 kg

Numai unitatea de aspirație, fără recipiente, capace recipiente și canulă

Vacuson 40

- Economică datorită excelentului raport preț/performață
- Capacitate de aspirație precisă și continuu reglabilă
- Tehnologie solidă, de încredere și aprobată
- Zgomot și vibrații scăzute
- Protecție automată împotriva revărsării
- Pompă cu piston fără consum de ulei

Vacuson 60, vid puternic și o înaltă capacitate de aspirație

Motorul pompei de aspirație Vacuson 60 acționează două pistoane pentru a genera vid. Astfel este atinsă performanța înaltă de aspirație de 60 de litri pe minut.

Un motor cu două pistoane pentru generarea de vid predestinează pompa de vid Vacuson 60 pentru aplicații avansate, în comparație cu Vacuson 40. Operează într-un mod robust, silențios și fiabil, care vă permite să nu vă ridicați privirea de pe pacient. Prin reglajele fine ale vidului, puteți să operați și în domenii mai sofisticate, unde este important să păstrați

vidul la un nivel reglat. Gama largă de extensii și accesorii a Nouvag completează acest sistem la un nivel care nu prea lasă loc la mai mult de dorit.



Vacuson 60

- Economică datorită excelentului raport preț/performață
- Capacitate de aspirație precisă și continuu reglabilă
- Tehnologie solidă, de încredere și aprobată
- Zgomot și vibrații scăzute
- Protecție automată împotriva revărsării
- Pompă cu dublu piston fără consum de ulei
- Cea mai variată gamă de aplicări
- Vid mai puternic
- Debit mai mare

Tip:	Vacuson 60
Tensiune la intrare:	115/230 Volți la 50-60 Hz
Consum de putere	250 W
Capacitate de aspirație:	Până la 60 l/min.
Vid maxim:	-0,9 bar la 686 mmHG
Dimensiuni, unitatea de comandă (L x l x î):	360 x 290 x 280
Greutate, unitatea de comandă:	12 kg

Numai unitatea de aspirație, fără recipiente, capace recipiente și canulă

Exemple de configurații pentru Vacuson 40 și Vacuson 60

Sistemul pompelor de aspirație Vacuson poate fi configurat individual după dorințele dumneavoastră și poate fi modificat în orice moment prin adăugarea de noi componente.



Exemplul 1

Pompă de extracție

- Vacuson 40
- Stativ
- 1 recipient de aspirație, 2 litri
- Pedală Vario AIR
- Cupă aspirație
- Suport tub



Exemplul 2

Pompă pentru chirurgie

- Vacuson 60
- Stativ
- 2 recipiente de aspirație, 5 litri
- Canulă Yankauer
- Suport tub

Sisteme de colectare

Uneori, logic este să aveți la îndemână recipiente standard pentru aspirație, altelei e nevoie să înlocuiți sau să aruncați un recipient fără complicații, fără a pierde timp cu curățarea și reinstalarea. Alegeți din colecția noastră de recipiente pentru aspirație reutilizabile și de unică folosință, pentru a lucra mereu într-un echilibru între confort și avantaj economic.

Reutilizabile



Art. 4245

Recipient de aspirație cu o capacitate de 5 litri pentru Vacuson 40/60 și 60 LP. Compatibil cu capacul 4058.



Art. 4052

Recipient de aspirație cu o capacitate de 2 litri pentru Vacuson 40/60 și 60 LP. Compatibil cu capacul 4058.



Art. 4058

Capac cu dispozitiv de siguranță împotriva revărsării, pentru recipientele de 2 și 5 litri, pentru Vacuson 40/60 și 60 LP.



Art. 4033/4093

Recipient de aspirație complet cu capac pentru Vacuson 18. Recipient gradat cu capacități de 1,5 și 2 litri. Recipientul și capacul sunt disponibile și separat, conform imaginilor din dreapta.



Recipient de 1,5 litri
Art. 4033

Recipient de 2,0 litri (fără imagine) Art. 4093



Recipient de 1,5 litri
Art. 4049



Recipient de 2,0 litri
Art. 4094



Art. 4039

De unică folosință



Art. 4030

Set (kit) individual constând din pungă pentru lichide, cu capac, de unică folosință, accesoriu de retenție și recipient gradat pentru Vacuson 40/60 și 60 LP. Recipient gradat cu capacitatea de 2,0 litri. Ventilul de aer este hidrofobic conform GORE™, cu protecție SMOKE®. Punga pentru lichide cu capac, de unică folosință, se furnizează în cutii de 50 buc., iar recipientele gradate sunt disponibile și separat.



Art. 4030



Art. 4036



Art. 4035

Extensii și accesorii

Pentru a face munca de zi cu zi cât mai eficientă posibil, Nouvag oferă numeroase extensii și accesorii utile. Completați-vă gama de echipamente, pentru a vă face munca cât mai ușoară și practică. A avea accesoriile potrivite la îndemână la momentul potrivit este esențial. Alegeți Nouvag ca partenerul dvs. la alegerea de seturi de tubaj, filtre și alte articole de consum.

Art. 4122

STAND este un dispozitiv mobil pentru transport. Este echipat cu o poliță inferioară și una superioară, pe care pot fi montate diverse dispozitive. Standul STAND vine cu 4 roți antistatice, din care 2 sunt blocabile.



Art. 1898

SANICAR este un dispozitiv mobil pentru a transporta sau a căra un maxim de 3 dispozitive. Este echipat cu trei tăvi inferioare, o tijă opțională pentru agățarea unui recipient și un ștecher de ieșire cu 3 prize și un comutator principal iluminat. Patru recipiente de aspirație pot fi adaptate pe tava superioară, respectiv alte accesorii similare. SANICAR vine cu roți antistatice, dintre care 2 sunt blocabile.

Art. 4053/4054

Cupe de aspirație pentru utilizare în obstetrică, cu diametrul de 60 mm (4053) sau 70 mm (4054)




Art. 4242

Regulator de picior pentru pompa de extracție, cu 2 metri de tub din silicon, inclusiv conectori la ambele capete.

Art. 4118

Suport tuburi pentru conectarea la accesoriul de suspensie fie al Sanicar (1898), sau al Stand (4122), sau chiar cu Vacuson 40, 60 și 60 LP.

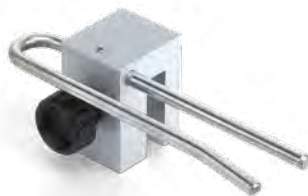

Art. 4246

Filtru hidrofob împotriva bacteriilor, pentru Vacuson 18/40/60 și 60LP. A se schimba periodic la fiecare 8 ore de operare, sau imediat ce se adună spumă.



Art. 4043

Pahar clătire cu modul de racord pentru conectarea la Sanicar (1898), Stand (4122), sau Vacuson 40, 60 sau 60 LP.



Art. 28535

Conector unghiular din aluminiu pentru a fi utilizat în locul piesei drepte din plastic, pentru a operare mai convenabilă.



Art. 6026

Tub steril, de unică folosință, de 4 m lungime, pentru conectarea piesei de mână a canulei la capacul recipientului de aspirație. Diametrul interior/exterior al tubului este de 5 mm/8 mm.



Art. 4076

Tub sterilizabil din silicon pentru pompă, 2 metri, pentru Vacuson 40/60. Diametru tub, interior/exterior, 8 mm/11 mm.



Instrumente pentru aspirație

Chiuretele și canulele pentru ginecologie se încadrează perfect în gama de produse pentru sistemele de aspirație Nouvag. Toate produsele prezentate sunt sterilizabile și autoclavabile.

Canule de aspirație



Art. 4449

Andrews Pynchon cu lungimea de 24 cm și calibrul central de 2,0 mm în diametru.



Art. 4446



Canulă de aspirație Yankauer cu lungimea de 28 cm și un calibrul central de 2,0 mm în diametru.

Acesorii pentru ginecologie (chiurete)



Art. 4420

Tub de racord pentru chiurete.



Art.

4430



Ø 14 mm

Art.

4429



Ø 12 mm

Art.

4428



Ø 10 mm

Art.

4427



Ø 8 mm

Art.

4426



Ø 6 mm

Art.

4425



Ø 4 mm


Mai multe pompe de aspirație și de infiltrație Nouvag



Sistem de liposucție **Vacuson 60 LP**, inclusiv pompă de infiltrație, pompă de aspirație, canulă de mână corespunzătoare și recipiente pentru aspirație. Se livrează pe un stand robust cu pedală și toate tuburile necesare. Informații suplimentare pot fi găsite în broșura noastră «Chirurgie plastică și cosmetică».



Dispenser DP 30 LipoPlus pompă peristaltică de infiltrație, ideală ca pompă de tumescență pentru liposucție. O conectare foarte ușoară a setului de tuburi. O performanță a infiltrației de până la 27 de litri pe oră.

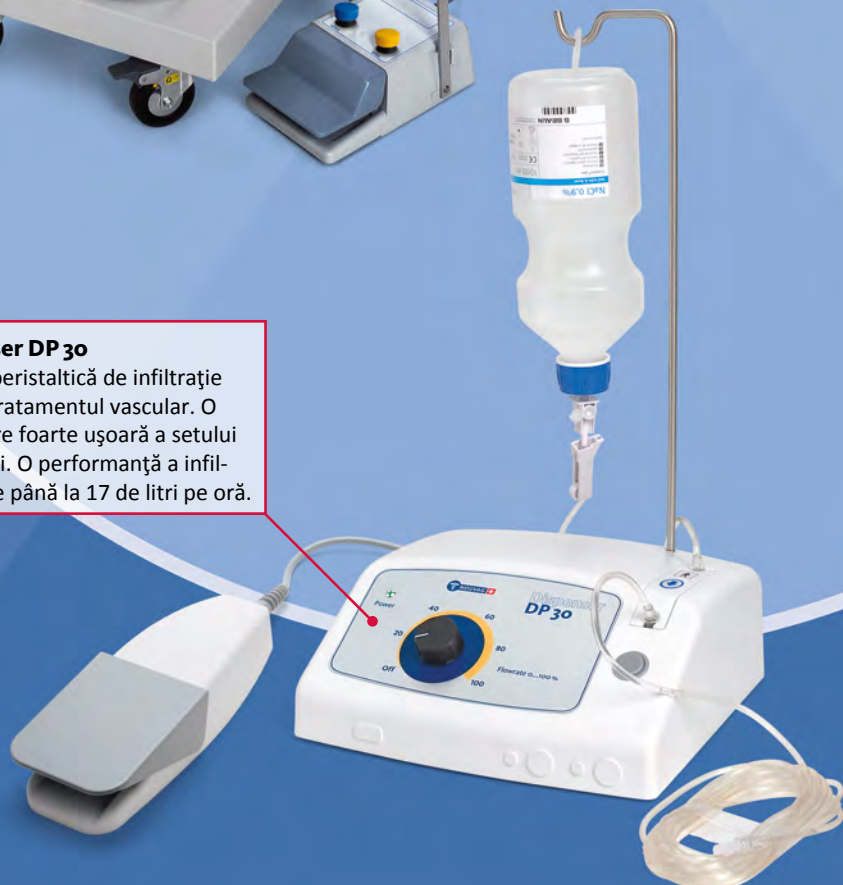

Dispenser DP 30 pompă peristaltică de infiltrație pentru tratamentul vascular. O conectare foarte ușoară a setului de tuburi. O performanță a infiltrației de până la 17 de litri pe oră.

Vacuson 60 LP cu canula de mână corespunzătoare nu este disponibil în Belgia și SUA.



Nouvag AG · P. O. Box 180 · St.Gallerstr. 23–25 · CH-9403 Goldach
Telefon +41 (0)71 846 66 00 · Fax +41 (0)71 846 66 70
info@nouvag.com · www.nouvag.com

Nouvag GmbH · Schulthaißstr. 15 · D-78462 Konstanz
Telefon +49 (0)7531 1290-0 · Fax +49 (0)7531 1290-12
info-de@nouvag.com · www.nouvag.com

Nouvag USA Inc. · 18058 Albyn Court · CA-93532 Lake Hughes · SUA
Telefon +1 661 724 0217 · Fax +1 661 724 1590
Telefon netaxabil (800) 673 7427
paul@nouvagusa.com · www.nouvag.com

Partenerii Nouvag: