

# Disecție precisă în anatomie cu pereți subțiri

*Beneficiați de o soluție all-in-one, care  
îmbină tehnologia de ultimă generație  
cu o mai bună flexibilitate.*

*Injectați, tăiați, coagulați – accelerați  
fluxul de lucru prin utilizarea instantanee  
fără a schimba instrumentul.*

**ADAPTAȚI-VĂ PROPRIA TEHNICĂ.**

## HYBRIDknife® flex I- Type

Ridicând  
standardele endoscopiei  
spațiului 3

**erbe**  
power your performance.

Erbe Elektromedizin GmbH · Waldhoernlestrasse 17 · 72072 Tuebingen · Germania · +49 7071 755-0 · info@erbe-med.com

JOIN US ON     



# Ridicând standardele endoscopiei spațiului 3

Electrod fin pentru rezecție precisă

Sondă flexibilă pentru o trecere lină, chiar și în retroflexie

Diametru mic pentru aspirație adecvată prin canalul de lucru

Duză coaxială pentru injecție la presiune înaltă

Mecanism de blocare pentru o lungime constantă a electrodului

erbe  
HYBRIDknife flex

Listă de revendicări de marketing D188716, V005

erbe



## AVANTAJELE SOLUȚIEI ALL-IN-ONE CU HYBRIDKNIFE® FLEX ȘI STAȚIA DE LUCRU GI:

- ☑ Injecție fără ac prin mucoasă
- ☑ Micro-căptușire repetată
- ☑ Moduri VIO® (ex. preciseSECT®)
- ☑ Răspândire termică minimă
- ☑ Coagulare și hemostază eficiente

### Injectați fără ac



Extindeți spațiul submucos după nevoie, fără a schimba instrumentul, utilizând tehnologia de hidrodisecție selectivă pentru țesuturi, fără ac și la presiune înaltă.

### Tăiați cu precizie

Electrodul subțire și scurt permite o precizie electrochirurgicală ridicată cu daune termice minime.

### Coagulați după necesitate

Aplicați diverse tehnici de coagulare ajustând contactul cu țesutul și utilizând modurile electrochirurgicale VIO®

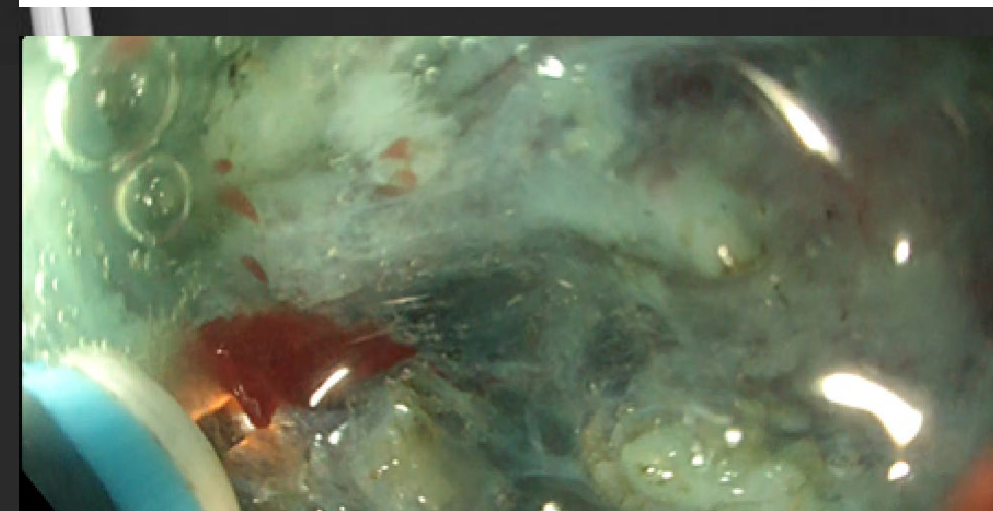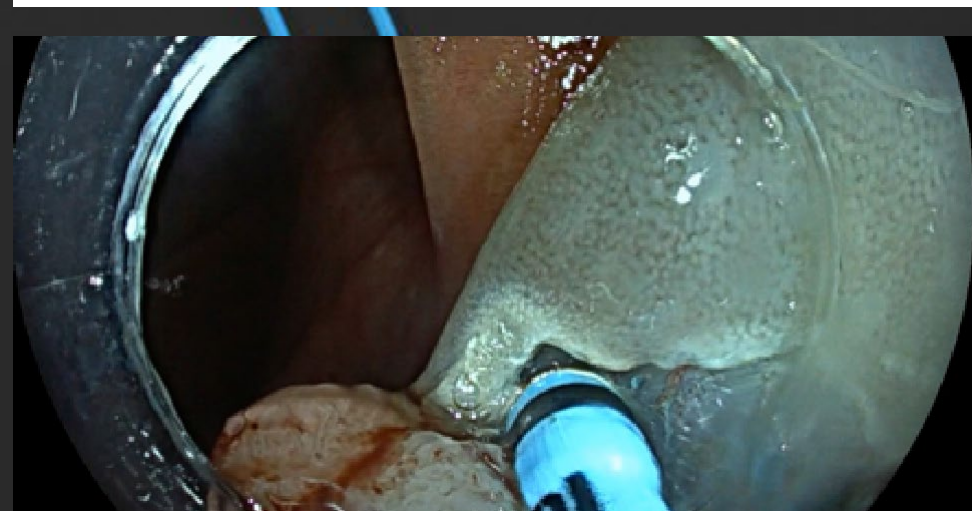

Lungime tub	2300 mm
Diametru exterior (capăt distal)	2,6 mm
Diametru exterior (tub)	2,1 mm
Lungime electrod	1,5 mm / 2,0 mm
Tip	I
Retro-flexibilitate	Mai mult de 210°
Tip I 1,5 mm	Nr. 20150-112
Tip I 2,0 mm	Nr. 20150-113