

Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® **220**

**Sigilează și taie pentru  
proceduri chirurgicale  
deschise**

## Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® 220 – instrument multifuncțional pentru chirurgie deschisă



### BUTON DE ELIBERARE

Împiedică tăierea neintenționată - poate fi deblocat din ambele părți.

### BUTONUL COAGULARE

Activează confortabil sigilarea fără a vă schimba prinderea.

### TĂIERE

La fel de simplu ca și cum ați închide mâna.

### MECANISM DE DECLANȘARE MANUAL

Funcția de blocare asigură o forță de strângere adecvată. Pentru rezultate de sigilare optimizate.

Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® 220 este utilizat pentru sigilarea vaselor cu diametrul de până la 7 mm. Vasul este prins, sigilat și disecat mecanic într-un singur flux de lucru. Pur și simplu deschideți mâna pentru a reapuca în orice moment.

**88 %**

dintre utilizatori au fost mulțumiți de prevenirea aderențelor

## Conceput pentru a vă simplifica operația

În comparație cu tratamentele chirurgicale fără instrumente pentru sigilare vasculară, timpul operației este redus. Înlocuirea clemelor sau a suturilor cu termofuziune reduce durerea postoperatorie, precum și durata și doza de analgezie.

- ▶ Împiedică efectul termic involuntar asupra țesuturilor adiacente datorită unei temperaturi pe partea din spate a camelor sub 40°C
- ▶ Face ca hemostaza imediată să poată fi obținută rapid - modul biCLAMP susține o coagulare inițială puternică

### CAME

Curbura camelor permite o vizualizare îmbunătățită a zonelor la care nu se poate ajunge ușor. Lungimea camelor: 36 mm.

- ▶ Vasele sigilate cu Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® 220 și modulul thermoSEAL® rezistă la o presiune de rupere ridicată cu o durată scurtă de sigilare
- ▶ Disecție aproape de structurile critice - răspândire termică laterală < 1 mm fără carbonizare
- ▶ Controlul sângerărilor difuze a suprafețelor mai mari - coagulare bipolară avansată cu came deschise

**85 %**

dintre utilizatori au fost mulțumiți de performanța de sigilare a vaselor

erbe



## Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® 220 și VIO® 3 – o pereche câștigătoare

Vasele sigilate cu Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® 220 sunt validate pentru a rezista la o tensiune arterială sistolică de 3ori mai mare. Menține aceeași calitate reproductibilă de sigilare a vaselor în timpul ciclurilor repetate de activare.

## VIO® 3 – conectați și operați

- ➔ Recunoașterea digitală a instrumentului configurează sistemul automat cu modul și efectul corespunzător.
- ➔ Obțineți un efect asupra țesutului fiabil, reproductibil și omogen - în mare măsură independent de tipul de țesut, datorită controlului constant al tensiunii.
- ➔ 25 milioane de măsurători/sec îmbunătățesc reproductibilitatea efectului asupra țesutului.
- ➔ Conectați și operați: Mufa MF-2 este compatibilă cu VIO® 300 D și VIO® 3 asigurând recunoașterea automată a instrumentului.




## moduri VIO® 3 pentru sigilarea optimă a vaselor *thermoSEAL®* și *biCLAMP*

Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® 220 este operat cu VIO® 3 folosind modul thermoSEA®.


Modul biCLAMP extinde versatilitatea instrumentului și ajută la adaptarea la condițiile unice ale fiecărui pacient.

Aflați mai multe despre modul thermoSEA® și biCLAMP aici.

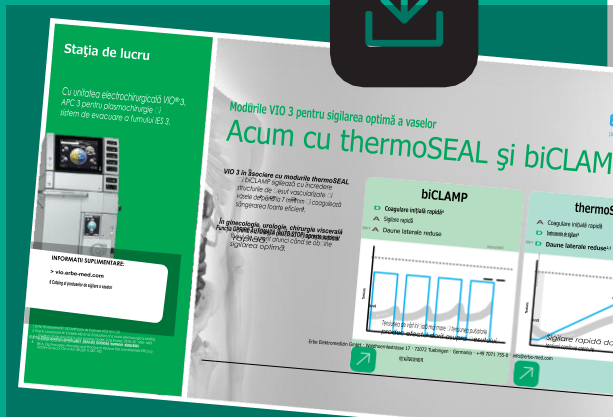

## Zona multimedia

**76 %**  
ar recomanda Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® 220 unui coleg

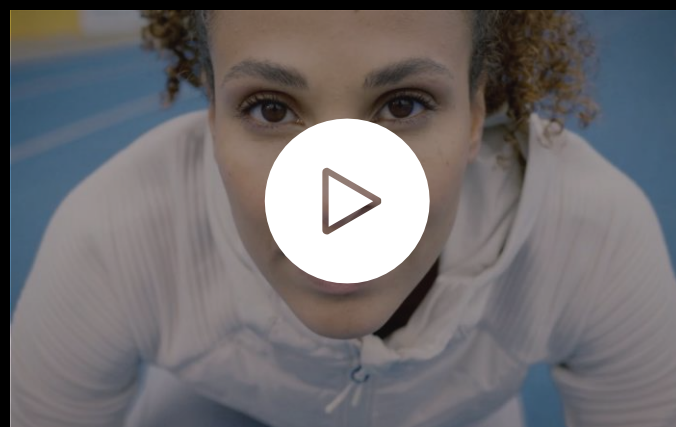

Conceput pentru a vă simplifica operația



Prezentarea produsului



Cum se utilizează



Rezecție abdominală multiviscerală cu Instrumentul pentru sigilare vasculară BiClamp® 220 – Jörg Baral, MD; șef adjunct al centrului colorectal, Spitalul Municipal Karlsruhe, Germania

[erbe-med.com/biclamp-knife-220](https://erbe-med.com/biclamp-knife-220) [Catalog produs](#) [medical-videos.com](https://medical-videos.com) [vio.erbe-med.com](https://vio.erbe-med.com)



Erbe Elektromedizin GmbH · Waldhoernlestrasse 17 · 72072 Tuebingen · Germania · +49 7071 755-0 · info@erbe-med.com

FIȚI ALĂTURI DE NOI PE