


# Dermoscop HEINE DELTA 30 UV

Un stralucire dincolo de vizibil. Iluminare ultravioleta, polarizata si nepolarizata reunite intr-un dermatoscop avansat.

Prin extinderea spectrului de lumina, dermatoscopul HEINE DELTA 30 UV imbunatateste ceea ce este vizibil si evidentiaza detaliile structurale – oferind o claritate diagnostica de nivel „galactic”. Manipularea sa intuitiva si integrarea perfecta a mai multor optiuni de iluminare simplifica examinarea si sustine luarea unor decizii clinice sigure.

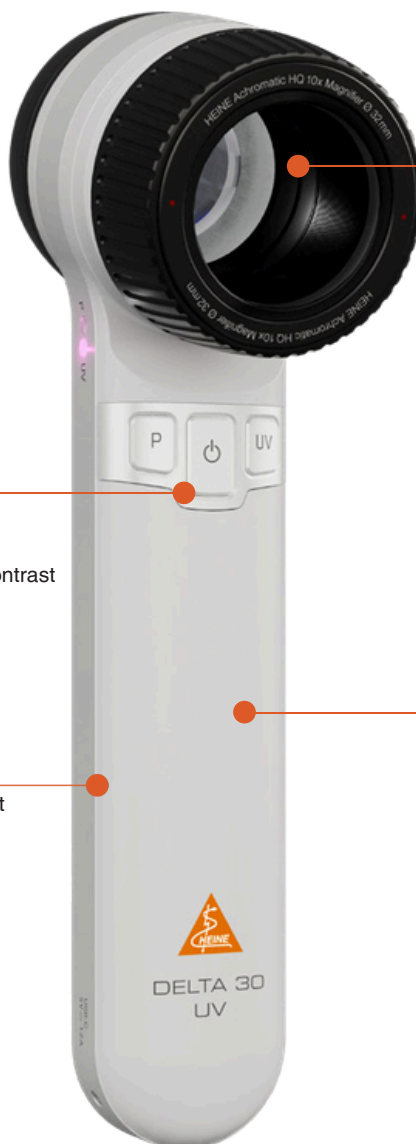

## Sistem optic acromatic HEINE pentru un camp vizual optim

- Lentila de 32 mm care ofera un camp vizual „real” de 30 mm
- Marire de 10x pentru examinare detaliata
- Ajustare dioptrica integrata pentru focalizare mai precisa

## Trei optiuni de iluminare intr-un singur dispozitiv

- Comutare usoara intre iluminare UV, polarizata si nepolarizata
- Redare naturala a culorilor pentru un contrast imbunatatit si o evaluare precisa

## smooth SURFACE


- Design igienic, suprafata usor de curatat
- Conexiuni incastrate pentru a sustine standarde optime de igiena

## Durabil si robust pentru o fiabilitate ridicata

- Cadru din aluminiu ultra-usor pentru rezistenta si durabilitate
- LEDHQ cu durata de viata practic nelimitata si performanta constant puternica



# Dermatoscop HEINE DELTA 30 UV

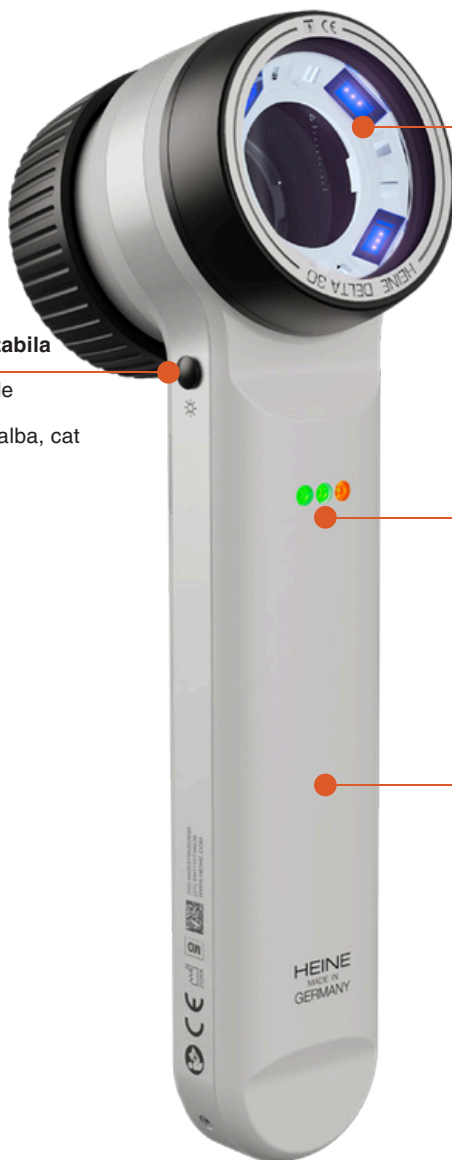

## Intensitate luminoasa personalizabila

- Buton lateral cu trei niveluri de intensitate
- Reglabila atat pentru lumina alba, cat si pentru iluminarea UV

## Iluminare UV pentru vizualizarea fluorescentei

- Doisprezece LED-uri UV, de obicei la 365 nm, asigura o iluminare uniforma
- Filtre speciale garanteaza lumina UV pura si constanta, eliminand lungimile de unda nedorite

## Optiuni inteligente pentru sursa de alimentare

- Indicator de stare a incarcarii
- Functie de oprire automata
- Reincarcabil prin USB-C, cu cablu sau statie de incarcare

## Intuitiv si ergonomic

- Maner inclinat pentru pozitionare perfecta
- Utilizare usoara pentru examinari rapide, dar precise
- Dimensiuni compacte pentru utilizare mobila si flexibila



Discover More

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
www.heine.com



We reserve the right to change specification without notice.

04 | 26. A-000.00.278 EN

QUALITY  
MADE IN GERMANY

